

nosiboo^{*}eco
manual nasal aspirator

Instrukcja obsługi

Ustny Aspirator do Nosa Nosiboo ECO



E-Mail: customerservice@nosiboo.com

Strona internetowa: www.nosiboo.eu

Tel: +36 72 551 642




Wyprodukowany przez: ATTRACT KFT.

H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Węgry

Made in EU



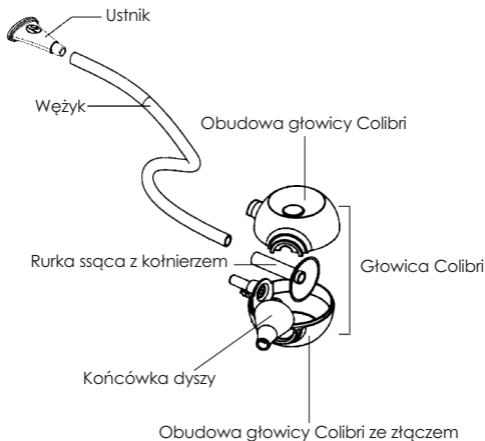

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa

Jeżeli nie uda się uniknąć niebezpiecznych sytuacji opisanych poniżej, może dojść do obrażeń ciała użytkownika lub nawet do wypadku śmiertelnego.

Ostrzeżenie – Urządzenie może być używane wyłącznie do usuwania wydzieliny z nosa dziecka. Po każdym użyciu należy zdezynfekować głowicę Colibri. Nie zostawiać zdemontowanych części Nosiboo ECO w zasięgu dzieci, ponieważ mogą je połknąć. Urządzenie może być używane tylko przez dorosłych. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej.

Przed użyciem urządzenia upewnić się, że wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane. Jeśli po użyciu urządzenia na nosie dziecka pojawi się wysypka lub zaczerwienienie, nie używać go ponownie! Zasięgnąć porady lekarza! Nie należy używać w przypadku hemofilii, jeśli naczynia krwionośne przegrody nosowej rozszerzają się — w przypadku częstego krwawienia z nosa, podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, w przypadku wrodzonych wad rozwojowych (np. rozszczep podniebienia).

1. Przeznaczenie

Zapobieganie powikłaniom dziecięcych przeziębień i przyspieszenie procesu rekonwalescencji przez usunięcie wydzieliny z nosa. Wyrób zalecany dla dzieci (zazwyczaj poniżej 4. roku życia), które nie są w stanie samodzielnie usunąć wydzieliny poprzez wydmuchiwanie nosa. Podciśnienie potrzebne do zasysania jest wytwarzane za pomocą ust użytkownika (dzięki rozłączanej konstrukcji w sposób pośredni).

Podczas odsysania wydzieliny z nosa niemowlęta powinny leżeć, a małe dzieci siedzieć w stabilnej pozycji. Włożyć ustnik do ust, a zdezynfekowaną wcześniej końcówkę dyszy do jamy nosowej, kierując ją delikatnie na zewnątrz w stronę gałki ocznej. W tej pozycji można lekko poruszać końcówką dyszy podczas nieciężkiego zasysania ustami. Podczas użycia punkt złączenia wężyka powinien być skierowany w dół. Suchą lub bardzo gęstą wydzielinę z nosa można rozpuścić za pomocą roztworu soli fizjologicznej. Jednorazowo należy stosować nie więcej niż 5 ml płynu. Po zastosowaniu roztworu należy odczekać kilka minut przed użyciem aspiratora do nosa. Nosiboo ECO może pomieścić do 5 ml rzadkiego płynu. Zasysana ciecz gromadzi się na wewnętrznej ściance głowicy i dzięki dopracowanej konstrukcji nie wydostaje się z wnętrza głowicy Colibri. To sprawia, że może być bezpiecznie używana bez żadnych elementów filtrujących.

2. Zapoznanie z urządzeniem i uruchomienie

1. Wyczyść części głowicy Colibri (patrz rozdział Czyszczenie i przechowywanie)
2. Włóż rurkę ssącą z kołnierzem do połówki obudowy głowicy Colibri ze złączem
3. Połówkę obudowy głowicy Colibri, która nie ma złącza, umieść we właściwej pozycji
4. Wciśnij elastyczną końcówkę dyszy do pasującego otworu
5. Przymocuj jeden koniec wężyka do złącza głowicy Colibri
6. Przymocuj drugi koniec wężyka do ustnika

Urządzenie może być używane kilka razy dziennie; ogólnym celem jest ułatwienie dziecku swobodnego oddychania. Zalecana częstotliwość stosowania: w razie potrzeby kilka razy dziennie, po przebudzeniu, przed jedzeniem i spaniem.

3. Czyszczenie i przechowywanie – Głowicę Colibri można rozłożyć po odłączeniu wężyka i końcówki dyszy. Aby oczyścić ustnik, należy odłączyć go od wężyka. Następnie części należy umyć w letniej wodzie, zdezynfekować w płynie dezynfekującym i pozostawić do wyschnięcia. Zalecany środek dezynfekujący: środek dezynfekujący Chicco. Urządzenie należy przechowywać w zamkniętym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia lub grzejników.

4. Środowisko – Ustny aspirator do nosa Nosiboo ECO nie stwarza żadnego zagrożenia dla środowiska, dlatego może być utylizowany wraz z odpadami domowymi.

5. Dane techniczne

Waga (z opakowaniem): 105 g

Wymiary (opakowanie szer. x wys. x gł.): 200 x 200 x 50 mm

Planowany okres użytkowania: 3 miesiące